


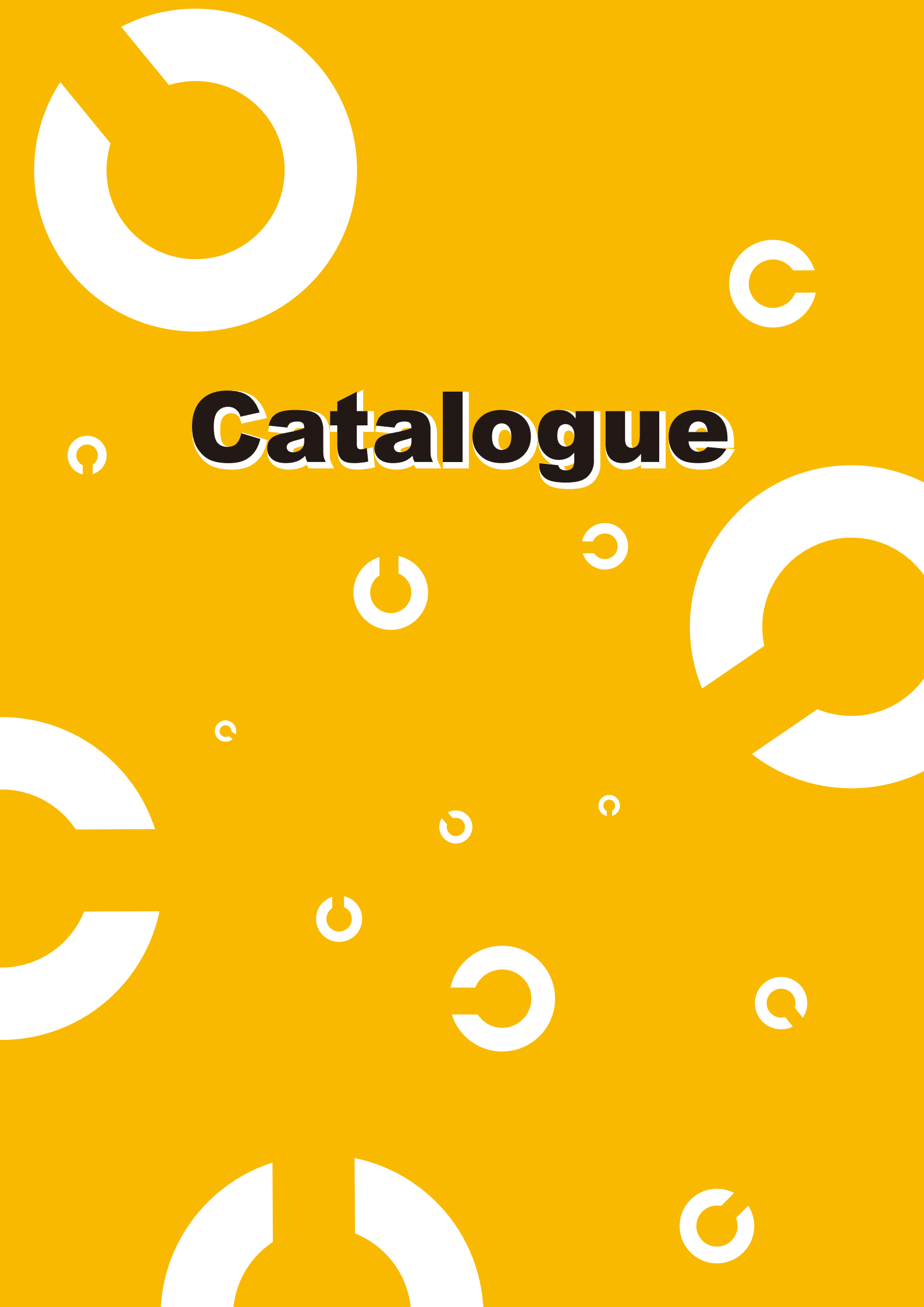

Catalogue

SK-80 電光投影式視力検査器

改正学校法に準拠し、スピーディーで正確な検査

特長

- ① 投影式により記憶は不可能、指示した個所だけを標示いたします。
- ② 4段階方式の測定を行う場合0.3 0.7 1.0の測定ボタン赤色のみを使用します。
(ABCDランクも標示しています)
- ③ 本体とコントロールBOXを接続するコードは7mあります。
- ④ 電源コード、本体からの接続コードは各接続部全て、コネクター式となっていますので収納時等、取扱いが苦になりません。
- ⑤ コード等収納フック付きです。(壁掛タイプにはありません)
- ⑥ 架台に本体を引っ掛ける機構なので移動やメンテナンスも簡単です。
- ⑦ 斜め入り8方向C環表5m用を標準としていますが、購入時指定して頂く事により他のタイプも選択できます。

型式(脚立式)	型式(壁掛式)	視力表のタイプ	測定距離	備考
SK-80A-5	SK-80B-5	斜め入り8方向	5m	標準
SK-80A-3	SK-80B-3		3m	
SK-80A-5N	SK-80B-5N	斜め無し4方向 (上下左右のみ)	5m	低学年検査用
SK-80A-3N	SK-80B-3N		3m	
SK-80A-5P	SK-80B-5P	絵表	5m	幼児用
(注) 斜め入り8方向、斜め無し4方向、幼児用絵表タイプは各コントロールBOXが専用となります。				


関連商品

斜め入り8方向 視力表(電球専用)	5m用、3m用	¥16,500
斜め無し4方向 視力表(電球専用)	5m用、3m用	¥16,500
幼児用 絵表(電球専用)	5m用	¥16,500
電球	450mA-12V-8W	¥550
コントロールBOX(SK-80専用)	8方向・4方向・絵表	¥60,500
コネクターコード	共通(8方向・4方向・絵表)	¥17,050

製造業許可番号 26BZ006008
製造販売業許可番号 26B3X00023
SK-80A ¥209,000 (スタンド式架台付き)
SK-80B ¥201,300 (壁掛式金具付き)



SK-80A

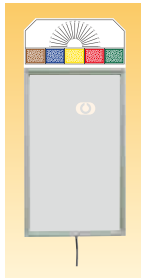

SK-80B



仕様

定格電圧	AC100V	視力表	国際標準ランドルト氏環
定格周波数	50Hz 60Hz	照明方式	内部照明
定格消費電力	12W	電球	450mA-12V-8W
上下可動範囲	1150-1650mm(1.0の高さを基準として)		
本体寸法	巾350×高さ750×厚さ70mm		
総高	最低1760mm 最高2260mm		
本体重量(総重量)	脚立式 4Kg(11Kg) 壁掛式 4Kg(5.5Kg)		

付属品

接続コード(7m)×1

SK-90 LED式視力検査器

改正学校法に準拠し、スピーディーで正確な検査

特長


- ① 投影式により記憶は不可能、指示した個所だけを標示いたします。
- ② LED照明で、よりクリアな表示と正確な検査を追求しました。
- ③ 4段階方式の測定を行う場合0.3 0.7 1.0の測定ボタン赤色のみを使用します。
(ABCDランクも標示しています)
- ④ 本体とコントロールBOXを接続するコードは7mあります。
- ⑤ 電源コード、本体からの接続コードは各接続部全て、コネクター式となっていますので収納時等、取扱いが苦になりません。
- ⑥ コード等収納フック付きです。(壁掛タイプにはありません)
- ⑦ 架台に本体を引っ掛ける機構なので移動やメンテナンスも簡単です。
- ⑧ 斜め入り8方向C環表5m用を標準としていますが、購入時指定して頂く事により他のタイプも選択できます。

型式(脚立式)	型式(壁掛式)	視力表のタイプ	測定距離	備考
SK-90A-5	SK-90B-5	斜め入り8方向	5m	標準
SK-90A-3	SK-90B-3		3m	
SK-90A-5N	SK-90B-5N	斜め無し4方向 (上下左右のみ)	5m	低学年検査用
SK-90A-3N	SK-90B-3N		3m	
SK-90A-5P	SK-90B-5P	絵表	5m	幼児用
(注) 斜め入り8方向、斜め無し4方向、幼児用絵表タイプは各コントロールBOXが専用となります。				

関連商品

斜め入り8方向 視力表(LED専用)	5m用、3m用	¥16,500
斜め無し4方向 視力表(LED専用)	5m用、3m用	¥16,500
幼児用 絵表(LED専用)	5m用	¥16,500
コントロールBOX(SK-90専用)	8方向・4方向・絵表	¥60,500
コネクターコード	共通(8方向・4方向・絵表)	¥17,050

製造業許可番号 26BZ006008
製造販売業許可番号 26B3X00023
SK-90A ¥264,000 (スタンド式架台付き)
SK-90B ¥256,300 (壁掛式金具付き)

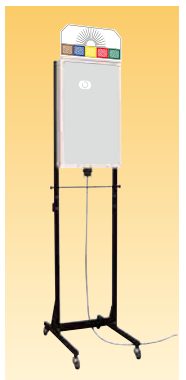

SK-90A
(ライトピンク)



SK-90B
(ライトピンク)



仕様

定格電圧	AC100V	視力表	国際標準ランドルト氏環
定格周波数	50Hz 60Hz	照明方式	内部照明
定格消費電力	5W 最大6W	光源	LED素子
上下可動範囲	1150-1650mm(1.0の高さを基準として)		
本体寸法	巾350×高さ750×厚さ70mm		
総高	最低1760mm 最高2260mm		
本体重量(総重量)	脚立式 5.5Kg(12.5Kg) 壁掛式 5.5Kg(7Kg)		

付属品

接続コード(7m)×1

SK-5N SK-3N 回転式視力検査器

簡易型4段階視力測定器 意匠登録出願済

特長

- ① A, B, C, D, というランク設定による4段階の測定方式の簡易型測定器です。
- ② マグネット付きだから取り付け、移動が楽です。
- ③ 室に設置すれば児童、生徒は自ら視力を確認できます。

取扱説明

マグネット又は取り付け穴で任意の場所へ固定し5m用、3m用の定位置に被検者を立たせ表示板を指で回転させ C の方向の数字を読ませます。

判定

3方向中の2方向が判読できれば判別できたとする。

仕様

寸法	巾170×高さ400×厚さ18mm
材質	アクリル(マグネット付き)


製造業許可番号 26BZ006008
製造販売業許可番号 26B3X00023
SK-5N(5m用) ¥20,350
SK-3N(3m用) ¥20,350



SK-5N
(5m用)



SK-3N
(3m用)

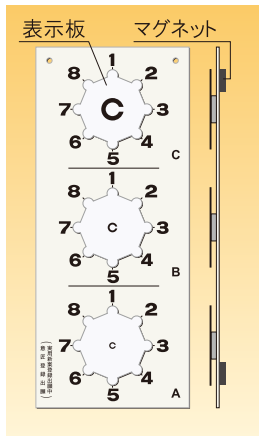

RC-80 電子式視力検査器

ワイヤレス方式でスピーディーで正確な検査

- 特長**
- ① 投影式により記憶は不可能、指示した個所だけを標示いたします。
 - ② 4段階方式の測定を行う場合0.3 0.7 1.0の測定ボタン赤色のみを使用します。(ABCDランクも標示しています)
 - ③ 0.1～2.0の測定スイッチ13個は、同じスイッチを押す事により測定値の視標はランダム(左右)に標示します。
又コントロールBOXにも標示します。
 - ④ ワイヤレス方式で投光距離は約8mあります。
 - ⑤ コード等収納フック付きです。(壁掛タイプにはありません)
 - ⑥ 本体及びコントロールBOXの標示は約15秒で消灯します。(通常検査は5秒以内に解読させます)
 - ⑦ 架台に本体を引っ掛ける機構なので移動やメンテナンスも簡単です。
 - ⑧ 斜め入りC環表5m用を標準としていますが、購入時指定して頂く事により他のタイプも選択できます。

型式(脚立式)	型式(壁掛式)	視力表のタイプ	測定距離	備 考
RC-80A-5	RC-80B-5	斜め入り8方向	5m	標準
RC-80A-3	RC-80B-3		3m	
RC-80A-5N	RC-80B-5N	斜め無し4方向	5m	低学年検査用
RC-80A-3N	RC-80B-3N	(上下左右のみ)	3m	

斜め入り8方向 視力表(電球専用)	5m用、3m用	¥16,500
斜め無し4方向 視力表(電球専用)	5m用、3m用	¥16,500
電球	450mAー12Vー8W	¥550
コントロールBOX(RC-80専用)	共通(8方向・4方向)	¥66,000

- その他**
- 8方向、4方向各タイプ視力表に対しコントロールBOXは共通ですから2タイプの視力表を併用できます。
 - ・電源をONにする→検査をする(斜め入り8方向をコントロールします)
 - ・2.0を押しながら電源をONにする→検査をする(斜め無し4方向(上下左右)をコントロールします)

RC-90 LED式視力検査器

ワイヤレス方式でスピーディーで正確な検査

- 特長**
- ① 投影式により記憶は不可能、指示した個所だけを標示いたします。
 - ② LED照明で、よりクリアな標示と正確な検査を追求しました。
 - ③ 4段階方式の測定を行う場合0.3 0.7 1.0の測定ボタン赤色のみを使用します。(ABCDランクも標示しています)
 - ④ 0.1～2.0の測定スイッチ13個は、同じスイッチを押す事により測定値の視標はランダム(左右)に標示します。
又コントロールBOXにも標示します。
 - ⑤ ワイヤレス方式で投光距離は約8mあります。
 - ⑥ コード等収納フック付きです。(壁掛タイプにはありません)
 - ⑦ 本体及びコントロールBOXの標示は約15秒で消灯します。(通常検査は5秒以内に解読させます)
 - ⑧ 架台に本体を引っ掛ける機構なので移動やメンテナンスも簡単です。
 - ⑨ 斜め入りC環表5m用を標準としていますが、購入時指定して頂く事により他のタイプも選択できます。

型式(脚立式)	型式(壁掛式)	視力表のタイプ	測定距離	備 考
RC-90A-5	RC-90B-5	斜め入り8方向	5m	標準
RC-90A-3	RC-90B-3		3m	
RC-90A-5N	RC-90B-5N	斜め無し4方向	5m	低学年検査用
RC-90A-3N	RC-90B-3N	(上下左右のみ)	3m	

斜め入り8方向 視力表(LED専用)	5m用、3m用	¥16,500
斜め無し4方向 視力表(LED専用)	5m用、3m用	¥16,500
コントロールBOX(RC-90専用)	共通(8方向・4方向)	¥66,000

- その他**
- 8方向、4方向各タイプ視力表に対しコントロールBOXは共通ですから2タイプの視力表を併用できます。
 - ・電源をONにする→検査をする(斜め入り8方向をコントロールします)
 - ・2.0を押しながら電源をONにする→検査をする(斜め無し4方向(上下左右)をコントロールします)

SP-7H 視力訓練機 エコーアイトレマシン

長年に渡り愛用され、高い実績のある視力訓練機

エコーアイトレマシン遠望明暗法とは
遠率約6倍の光学レンズとセットされたシャッターにより瞳孔の散大縮小の周期に無理なく合わせて適度に毛様態を運動させる訓練器です。
双眼鏡のように覗くと約6倍遠くに見える逆望遠鏡現象の中でシャッターにより真っ暗になってパッと明るくなり又景色が見える事が約3秒おきに繰り返されます。
その明暗差にて瞳孔は自然に収縮を繰り返します。
その原理により毛様態筋のトレーニングを行う訓練器です。

- 特長**
- ① 好きな所を見ているだけ。
 - ② 約1.5分の限定タイマーにより飽きずに訓練ができます。
 - ③ 左右違った視力でも問題はありません。
 - ④ 重量は350gなのでお子様でも訓練が苦になりません。




※医療用具ではありません。



- 取扱説明**
- 本器を通して何かを見ているだけです。
- ① スイッチを右にある時は左に、左にある時は右に押して下さい約1.5分で停止します。
 - ② 1日に4回～6回(6～9分)訓練してください。
 - ③ メガネ・コンタクトは使用せず裸眼で行ってください。
 - ④ 室内でも明るければ効果はありますが、明るい野外の自然遠景を見るほうがより大きな効果が得られます。

電 源	単2乾電池1個
寸 法	巾160×高さ150×厚さ52mm
重 量	350g

付属品
参考視力表×1／柔軟布×1／単2乾電池×1

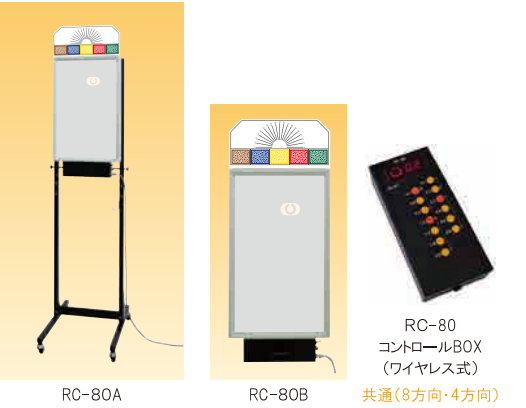

仕様	定格電圧	AC100V	視力表	国際標準ランドルト氏環
	定格周波数	50Hz 60Hz	照明方式	内部照明
	定格消費電力	12W	電球	450mAー12Vー8W
	上下可動範囲	1150ー1650mm(1.0の高さを基準として)		
	本体寸法	巾350×高さ840×厚さ70mm		
	総 高	最低1760mm 最高2260mm		
	本体重量(総重量)	脚立式 6Kg(13Kg) 壁掛式 6Kg(7.5Kg)		

付属品
ACアダプター(充電器)×1



仕様	定格電圧	AC100V	視力表	国際標準ランドルト氏環
	定格周波数	50Hz 60Hz	照明方式	内部照明
	定格消費電力	4W 最大5W	光源	LED素子
	上下可動範囲	1150ー1650mm(1.0の高さを基準として)		
	本体寸法	巾350×高さ840×厚さ70mm		
	総 高	最低1760mm 最高2260mm		
	本体重量(総重量)	脚立式 7.5Kg(14.5Kg) 壁掛式 7.5Kg(9Kg)		

付属品
ACアダプター(充電器)×1

RC-1000 LED式視力検査器

ワイヤレス方式でスピーディーで正確な検査
病院・医院に最適

製造業許可番号 26BZ006008
製造販売業許可番号 26B3X00023
RC-1000A ¥330,000 (スタンド式架台付き)
RC-1000B ¥322,300 (壁掛式金具付き)

特長

- ① 投影式により記憶は不可能、指示した個所だけを標示いたします。
- ② LED照明で、よりクリアな標示と正確な検査を追求しました。
- ③ 色覚検査部(R&G)は、LED照明で点灯します。
- ④ 4段階方式の測定を行う場合0.3 0.7 1.0の測定ボタン赤色のみを使用します。(ABCDランクも標示しています)
- ⑤ 0.1～2.0の測定スイッチ13個は、同じスイッチを押す事により測定値の視標はランダム(左右)に標示します。
又コントロールBOXにも標示します。
- ⑥ ワイヤレス方式で投光距離は約8mあります。
- ⑦ コード等収納フック付きです。(壁掛タイプにはありません)
- ⑧ 本体及びコントロールBOXの標示は約15秒で消灯します。(通常検査は5秒以内に解読させます)
- ⑨ 架台に本体を引っ掛ける機構なので移動やメンテナンスも簡単です。
- ⑩ 斜め入りC環表5m用を標準としています。購入時指定して頂く事により他のタイプも選択できます。


型式(脚立式)	型式(壁掛式)	視力表のタイプ	測定距離
RC-1000A-5	RC-1000B-5	斜め入り8方向	5m
RC-1000A-3	RC-1000B-3		3m
RC-1000A-5N	RC-1000B-5N	斜め無し4方向 (上下左右のみ)	5m
RC-1000A-3N	RC-1000B-3N		3m

関連商品


斜め入り8方向 視力表(LED専用)	5m用、3m用	¥16,500
斜め無し4方向 視力表(LED専用)	5m用、3m用	¥16,500
コントロールBOX(RC-1000専用)	共通(8方向・4方向)	¥82,500

その他

- 8方向、4方向各タイプ視力表に対しコントロールBOXは共通ですから2タイプの視力表を併用できます。
- ・電源をONにする→検査をする(斜め入り8方向をコントロールします)
- ・2.0を押しながら電源をONにする→検査をする(斜め無し4方向(上下左右)をコントロールします)

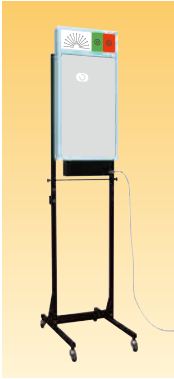

RC-1000A
(ライトブルー)

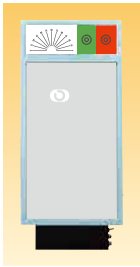

RC-1000B
(ライトブルー)



RC-1000
コントロールBOX
(ワイヤレス式)
共通(8方向・4方向)

仕様

定格電圧	AC100V	視力表	国際標準ランドルト氏環
定格周波数	50Hz 60Hz	照明方式	内部照明
定格消費電力	3W 最大7W	光源	LED素子
上下可動範囲	1150ー1650mm(1.0の高さを基準として)		
本体寸法	巾350×高さ790×厚さ70mm		
総 高	最低1720mm 最高2220mm		
本体重量(総重量)	脚立式 8.5Kg(15.5Kg)	壁掛式	8.5Kg(10Kg)

付属品

ACアダプター(充電器)×1

RC-1500 LED式視力検査器

ワイヤレス方式でスピーディーで正確な検査
病院・医院に最適

製造業許可番号 26BZ006008
製造販売業許可番号 26B3X00023
RC-1500A ¥363,000 (スタンド式架台付き)
RC-1500B ¥355,300 (壁掛式金具付き)

特長

- ① 投影式により記憶は不可能、指示した個所だけを標示いたします。
- ② LED照明で、よりクリアな標示と正確な検査を追求しました。
- ③ 色覚検査部(R&G)は、LED照明で点灯します。
- ④ 列灯(縦一列に点灯)が可能で矯正視力の測定が簡易になりました。
- ⑤ 4段階方式の測定を行う場合0.3 0.7 1.0の測定ボタン赤色のみを使用します。(ABCDランクも標示しています)
- ⑥ 0.1～2.0の測定スイッチ13個は、同じスイッチを押す事により測定値の視標はランダム(左右)に標示します。
又コントロールBOXにも標示します。
- ⑦ ワイヤレス方式で投光距離は約8mあります。
- ⑧ コード等収納フック付きです。(壁掛タイプにはありません)
- ⑨ 本体及びコントロールBOXの標示は約15秒で消灯します。(通常検査は5秒以内に解読させます)
- ⑩ 架台に本体を引っ掛ける機構なので移動やメンテナンスも簡単です。
- ⑪ 斜め入りC環表5m用を標準としています。購入時指定して頂く事により他のタイプも選択できます。

型式(脚立式)	型式(壁掛式)	視力表のタイプ	測定距離
RC-1500A-5	RC-1500B-5	斜め入り8方向	5m
RC-1500A-3	RC-1500B-3		3m
RC-1500A-5N	RC-1500B-5N	斜め無し4方向 (上下左右のみ)	5m
RC-1500A-3N	RC-1500B-3N		3m

関連商品


斜め入り8方向 視力表(LED専用)	5m用、3m用	¥16,500
斜め無し4方向 視力表(LED専用)	5m用、3m用	¥16,500
コントロールBOX(RC-1500専用)	共通(8方向・4方向)	¥88,000

その他

- 8方向、4方向各タイプ視力表に対しコントロールBOXは共通ですから2タイプの視力表を併用できます。
- ・電源をONにする→検査をする(斜め入り8方向をコントロールします)
- ・2.0を押しながら電源をONにする→検査をする(斜め無し4方向(上下左右)をコントロールします)



RC-1500A
(ライトブルー)

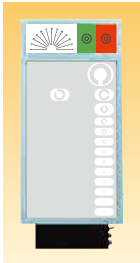

RC-1500B
(ライトブルー)



RC-1500
コントロールBOX
(ワイヤレス式)
共通(8方向・4方向)

仕様

定格電圧	AC100V	視力表	国際標準ランドルト氏環
定格周波数	50Hz 60Hz	照明方式	内部照明
定格消費電力	3W 最大19W	光源	LED素子
上下可動範囲	1150ー1650mm(1.0の高さを基準として)		
本体寸法	巾350×高さ790×厚さ70mm		
総 高	最低1720mm 最高2220mm		
本体重量(総重量)	脚立式 8.5Kg(15.5Kg)	壁掛式	8.5Kg(10Kg)


付属品

ACアダプター(充電器)×1


視力表

実用的なタイプを各種ご用意しています

8 斜め入り8方向／標準

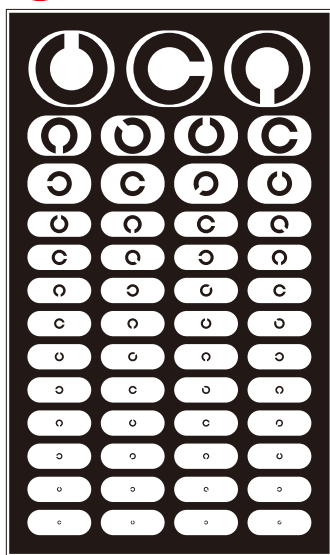


測定距離：5m

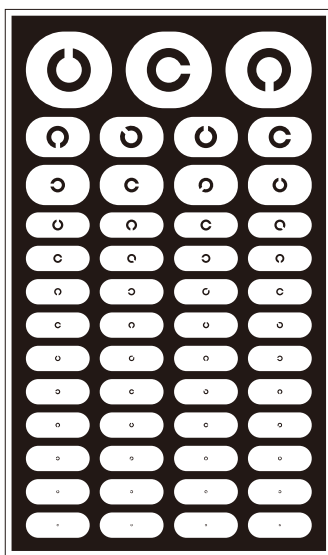


測定距離：3m

4 斜め無し4方向／低学年検査用

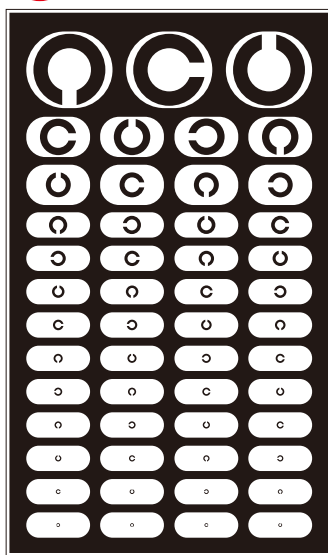


測定距離：5m

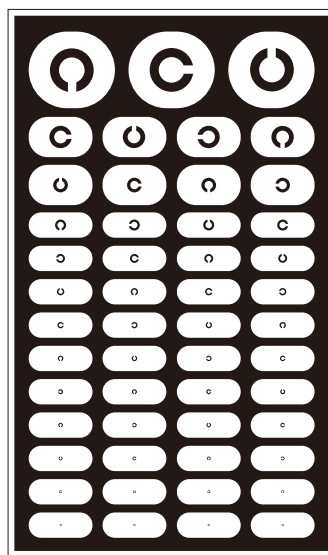

測定距離：3m


絵 絵表／幼児用

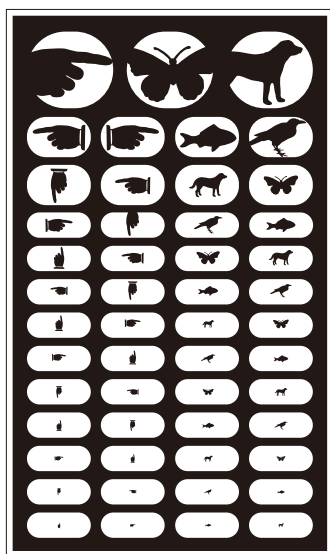

測定距離：5m

■ 視力検査器の種類により視力表が異なります。

LED用

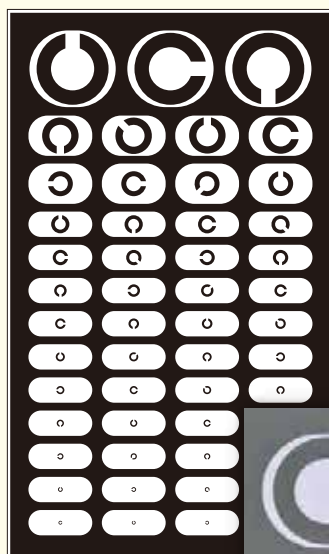


ベース：クリア透明




点灯時（視認性）

電球用

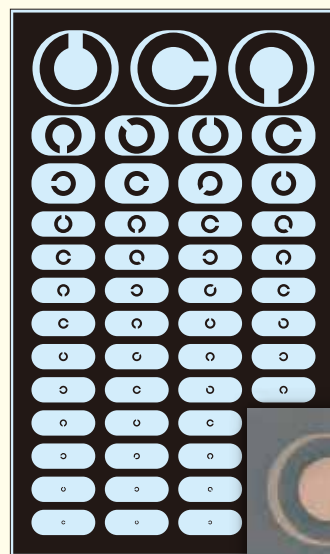

ベース：ブルー透明

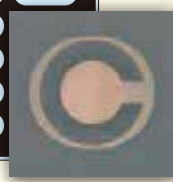

点灯時（視認性）


目のみえるしくみ

目に入ってきた光は、角膜と水晶体を通り屈折して、網膜に像が映し出されます。

目はピントを合わせるために**毛様体**（もうようたい）により水晶体の厚さを調節しています。

視力の低下は毛様体の衰えが原因の1つとされています。

目の水平断面図

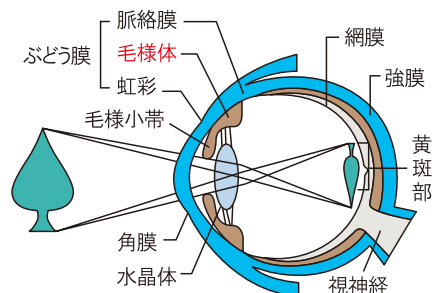

製品の仕様について

- ・常によりよい製品をご提供する努力の成果として予告なく仕様の変更または、商品の取り扱いを終了する場合もございます。
- ・商品写真はイメージですので、現物と異なる場合もございますので予めご了承ください。
- ・商品価格は、全て税抜価格となっております。

●販売店

●お問い合わせ

医療機器製造業許可番号 26BZ006008
医療機器製造販売業許可番号 26B3X00023

 **新和精工株式会社**

京都府八幡市上津屋南村5番地5
TEL(075)971-1238
FAX(075)972-0055
URL <http://www.shinwaseikou.co.jp>